

Rotating Anode X-Ray Tube
 Tubes Radiogènes à Anode Tournante
 Röntgenröhre mit rotierender Anode
 Tubos de Rayos-X con Ánodo Giratorio

- Common - Red
 Neutre - Rouge
 Neutral - Rot
 Común - Rojo

- Large - Black
 Grand - Noir
 Gross - Schwarz
 Largo - Negro


- Small - White
 Petit - Blanc
 Klein - Weiss
 Pequeño - Blanco

- Stand - By
 Attente
 Bereitschaft
 En Espera

- Frame or Chasis
 Masse
 Chassis
 Soporte o Chasis

- X-Ray Tube
 Tube Radiogène
 Röntgenröhre
 Tubo de Rayos X

- Radiation Filter or Filtration
 Filtre de rayonnement
 Filterung
 Filtración de Radiación

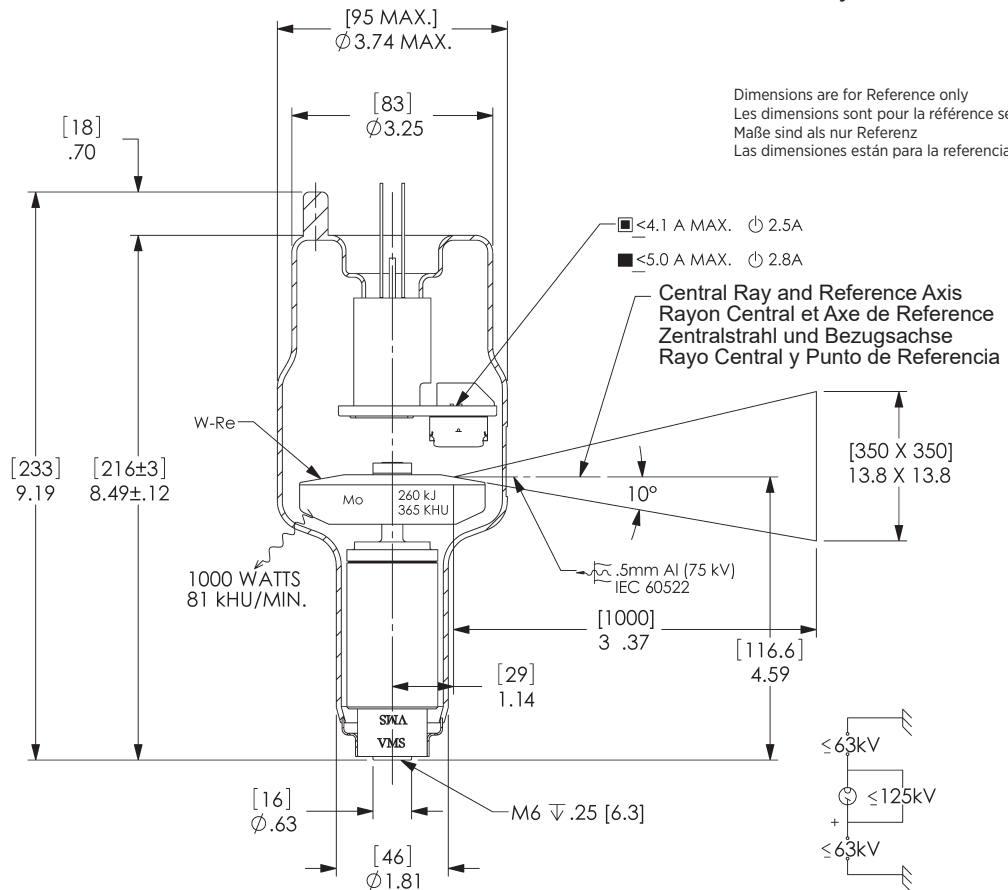

Dimensions are for Reference only
 Les dimensions sont pour la référence seulement
 Maße sind als nur Referenz
 Las dimensiones están para la referencia solamente



Note: Document originally drafted in the English language.

Product Description	Description du Produit	Produktbeschreibung	Descripcion del Producto
<p>The RAD-15 is a 125 kV, 260 kJ (365 KHU) rotating anode insert specifically designed for mobile surgical C-Arm applications. The insert features a 10° tungsten-rhenium molybdenum target and is available in the following focal spot combinations:</p> <p style="text-align: center;">0.3 - 0.6 IEC 60336</p> <p>Nominal Anode Input Power Small - 9.0 kW IEC 60613 Large - 35 kW IEC 60613 For the equivalent anode input power of 107 Watts</p>	<p>Le RAD-15 est un tube à anode tournante de 125 kV, 260 kJ (365 kUC) spécialement conçu pour les applications chirurgicales mobiles munies d'un support en forme de C. Il contient une anode composite en tungstène-rhénium et molybdène de 10° et est disponible dans les combinaisons focales suivantes:</p> <p style="text-align: center;">0,3 - 0,6 CEI 60336</p> <p>Puissance anodique nominale de l'anode Petit foyer - 9,0 kW CEI 60613 Grand foyer - 35 kW CEI 60613 Pour la puissance anodique d'équilibre thermique de 107 Watts</p>	<p>Die RAD-15 ist eine Röntgenröhre mit rotierender Anode von 125 kV und 260 kJ (365 kWE). Sie ist besonders geeignet für mobile chirurgische C-Arm Anwendungen. Die Röntgenröhre ist charakterisiert durch eine 10°-ige Anode, zusammengesetzt aus Wolfram, Rhenium und Molybdän. Folgende Brennfleck sind möglich:</p> <p style="text-align: center;">0.3 - 0.6 IEC 60336</p> <p>Nominale Anodenbezugsleistung Klein - 9.0 kW IEC 60613 Gross - 35 kW IEC 60613 Gilt bei einer Äquivalent - Anodenleistung von 107 Watts</p>	<p>El RAD-15 es un tubo de ánodo giratorio de 125 kV y 260 kJ (365 kUC), diseñado específicamente para uso en brazos móviles de cirugía (Brazos C). El tubo presenta un objetivo compuesto de tungsteno - renio y molibdeno, fijado a un ángulo de 10°. Es disponible en las siguientes combinaciones focales:</p> <p style="text-align: center;">0.3 - 0.6 IEC 60336</p> <p>Potencia nominal de entrada del anodo Foco fine - 9.0 kW IEC 60613 Foco grueso - 35 kW IEC 60613 Para una potencia equivalente del anodo de 107 Watts</p>



3 Ø Constant Potential

Single Load Ratings IEC 60613
 Abaqués de Charge pour Pose Unique CEI 60613
 Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
 Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

50 HZ - 2,850 RPM

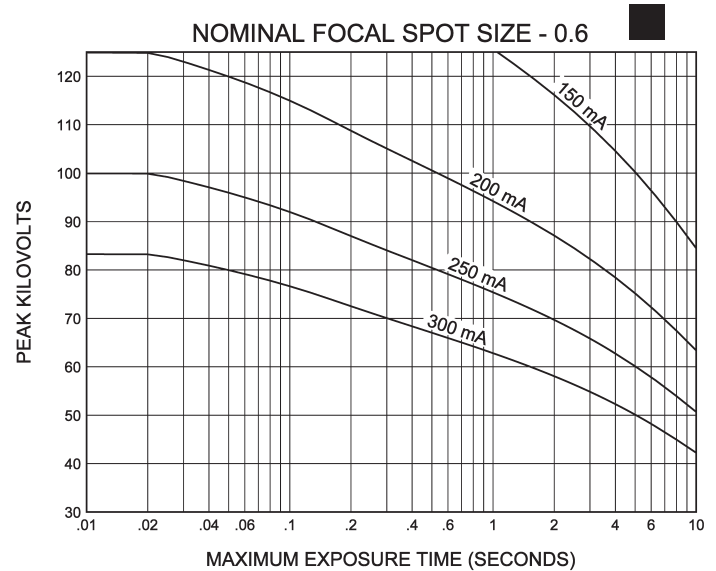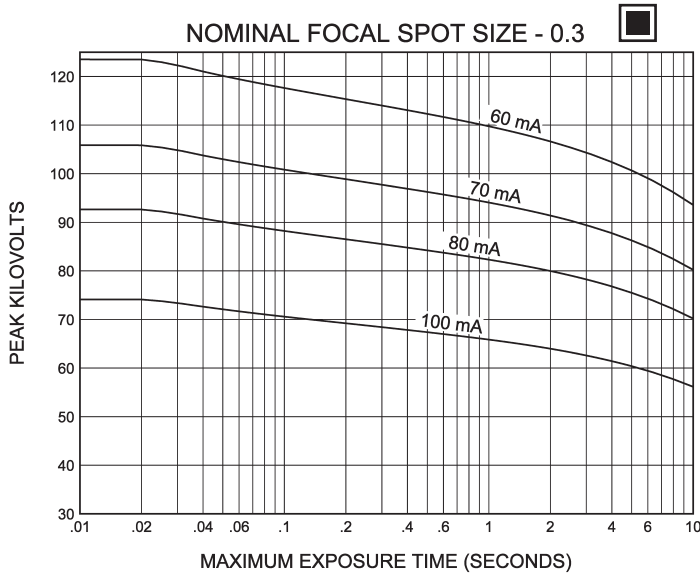



60 HZ - 3,450 RPM

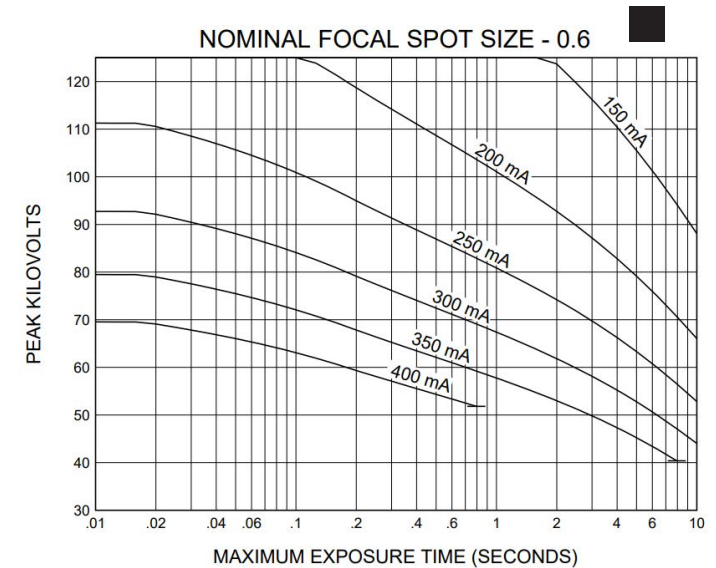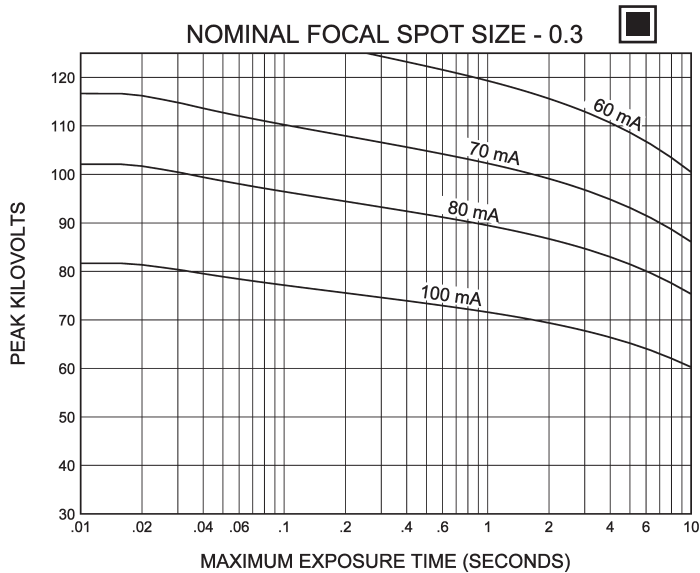



For 1Ø and other applications, please consult the manufacturer.	Pour 1Ø et autre applications, prière de consulter le Fabricant.	Für 1Ø und andere Anwendungen, konsultieren mit dem Fabrikant, bitte.	Para 1Ø y otras aplicaciones, por favor consulte a la Compañía.
Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613	Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613	Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613	Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

3 Ø Constant Potential

150 HZ - 8,500 RPM

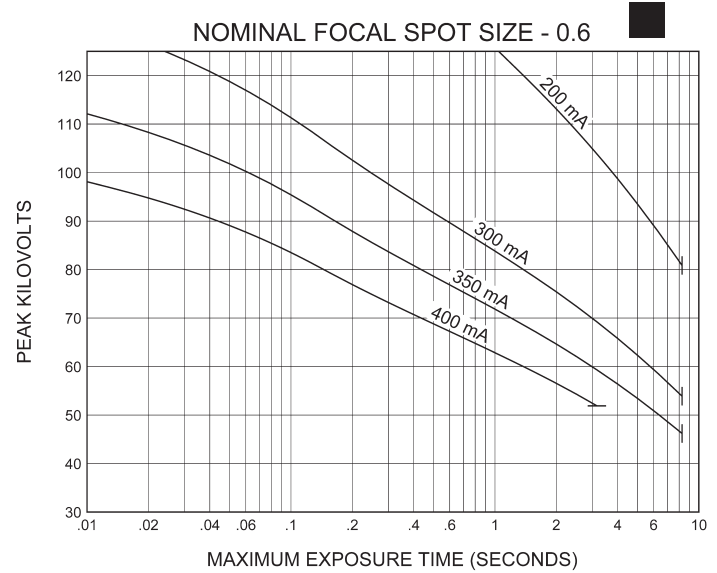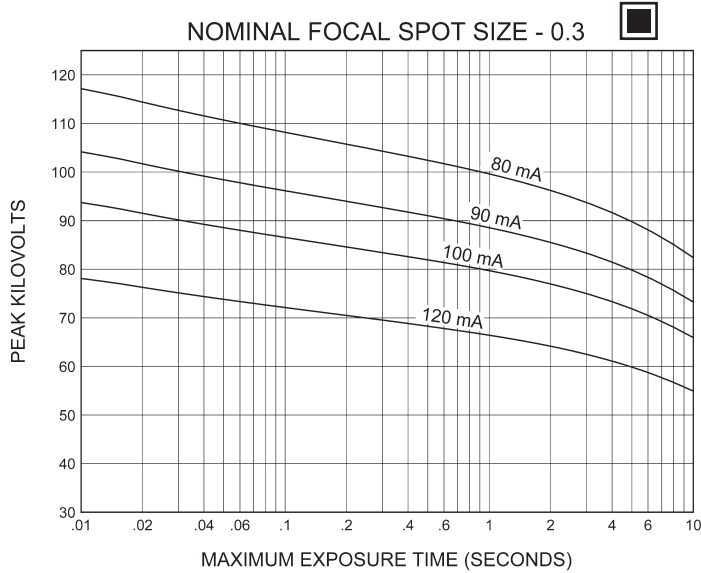


180 HZ - 9,500 RPM

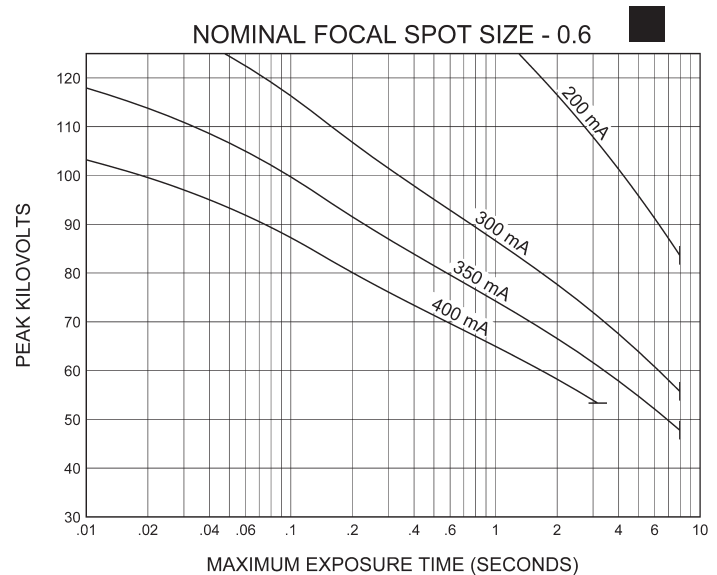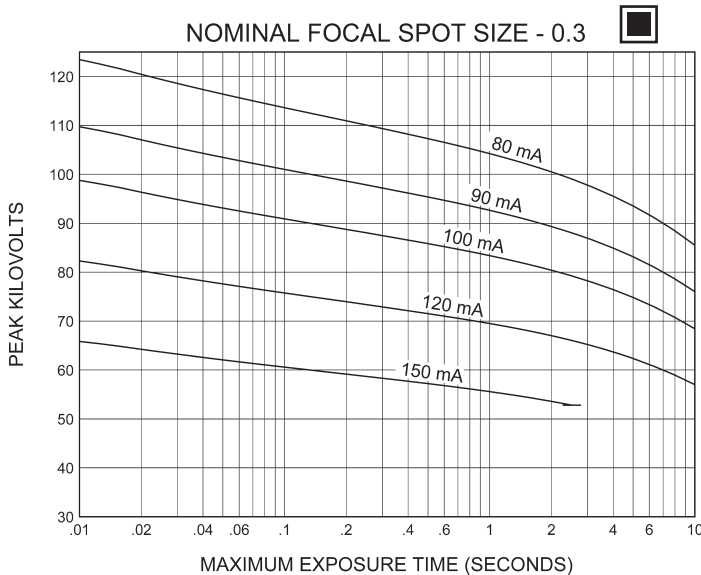


For 1Ø and other applications, please consult the manufacturer.	Pour 1Ø et autre applications, prière de consulter le Fabricant.	Für 1Ø und andere Anwendungen, konsultieren mit dem Fabrikant, bitte.	Para 1Ø y otras aplicaciones, por favor consulte a la Compañía.
Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613	Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613	Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613	Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

3 Ø Constant Potential

Filament Emission Charts IEC 60613
 Abaques d'Émissions des Filaments CEI 60613
 Heizfadenemissionsdiagramm IEC 60613
 Curvas de Emisión de los Filamentos IEC 60613

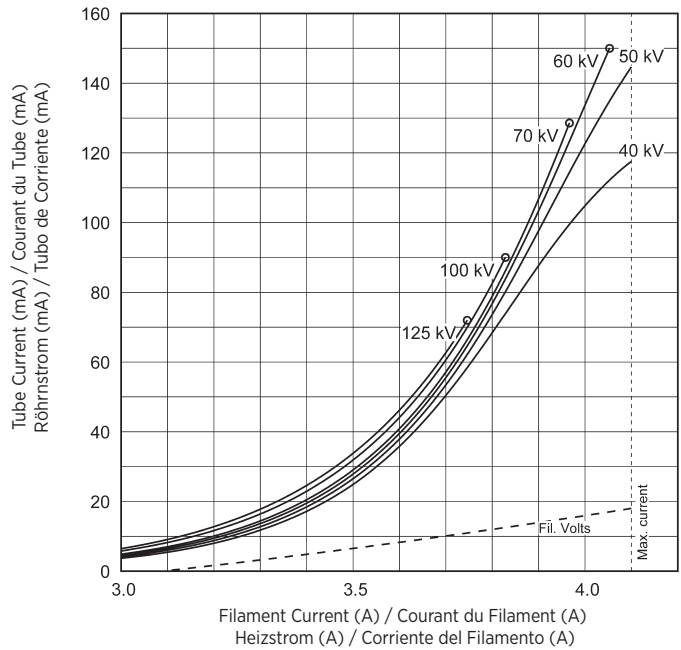

THREE PHASE EMISSION ($\pm .15$ A)
 0.3

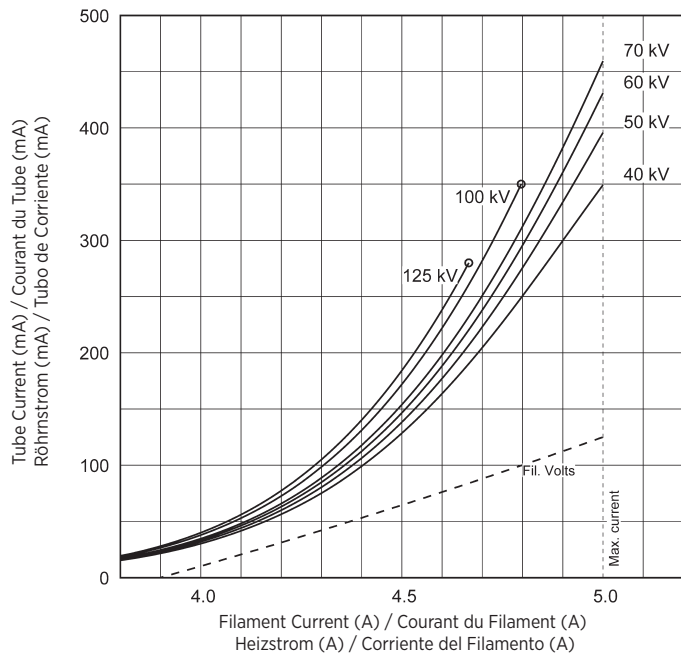

THREE PHASE EMISSION ($\pm .15$ A)
 0.6

Note: When using these emission curves for trial exposures, refer to the power rating curves shown for maximum kV, tube emission, filament current, exposure time, and target speed.

Remarque: Lors de l'utilisation de ces abaques pour des expositions d'essai, référez-vous aux courbes maximales de kV, d'émission du filament, de temps d'exposition et de vitesse de rotation.

Anmerkung: Wenn Sie diese Emissionskurven für Testaufnahmen verwenden, beziehen Sie sich hierbei auf die entsprechenden Nennleistungskurven für max. kV-Werte, Röhrenemission, Heizström, und Anodendrehzahl.

Nota: Si utiliza estas curvas de emisión para exposiciones de prueba, refiérase a las curvas de gradación de potencia para el máximo de kV, tubo de emisión, corriente en los filamentos, tiempo de exposición, y a las curvas de velocidad del objetivo.

CINERADIOGRAPHIC RATINGS

HOW TO USE CINERADIOGRAPHIC CHARTS

General: With the Cineradiographic rating chart we can determine the maximum allowable kW of the Cine pulse, or with a given kW determine maximum time in seconds the Cine run can progress.

The Most common way of using the charts is to determine maximum time of any expected Cine run and maximum duty factor. With a known duty factor and Cine run time kW can easily be determined.

Definition of Terms

Time in seconds: Total time of one Cine run, usually 5 to 12 seconds.

Duty Factor in Percent (DF%): Actual time during one second the x-ray tube is producing x-rays. If we select a 4 msec pulse width and 60 exposures per second the x-ray tube will be producing x-rays for a total of 240 msec each second or 24% of the time. The higher the DF number, the more load placed on the x-ray tube.

Peak Pulse Power: Peak energy in watts of any one Cine Pulse. Can be any combination of kV and mA allowed by Radiographic and Filament Emission curves.

Example: 80 kV at 400 mA equals
 $80,000 \text{ V} \times 0.4 \text{ A} = 32,000 \text{ W}$ or 32 kW

USING THE CINE RATING CHARTS:

RAD-15 60 Hz 3 Phase 0.6 Focal Spot

Example: Determine maximum kW allowed with the following known factors:

- Maximum Pulse Width 4 msec
- Exposures per Second 60
- Maximum Cine Run Time ... 10 seconds

Calculate Duty Factor: (DF%)

$$DF\% = \frac{\text{Pulse Width (mSec)} \times \text{Frames per Second}}{10}$$

$$DF\% = \frac{4 \text{ msec} \times 60 \text{ exp/sec}}{10} = \frac{240}{10} = 24\%$$

Refer to Rating Chart

RAD-15 60 Hz 3 Phase 0.6 Focal Spot:



At bottom of chart find 10 second line. Move vertically to intersection with 24% DF curve. Make a horizontal reference to left side of rating chart and note kW rating of 19 kW.

$kW = kV \times mA$. The kW of the exposure can be any combination of mA and kV allowed by the Radiographic and Filament Emission Charts.



The Cine rating charts are usable to 100% anode heat storage. Exceeding 100% anode heat storage will cause anode track erosion with high risk of tube destruction.

3 Ø Constant Potential

50 Hz

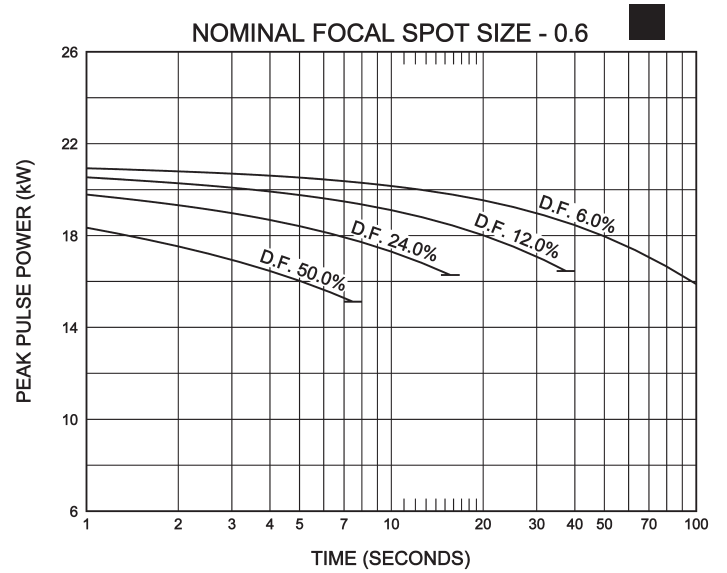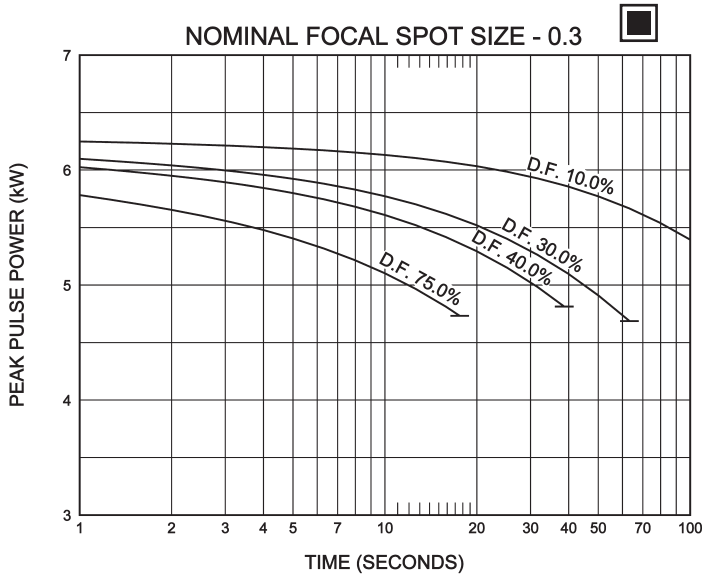

60 Hz

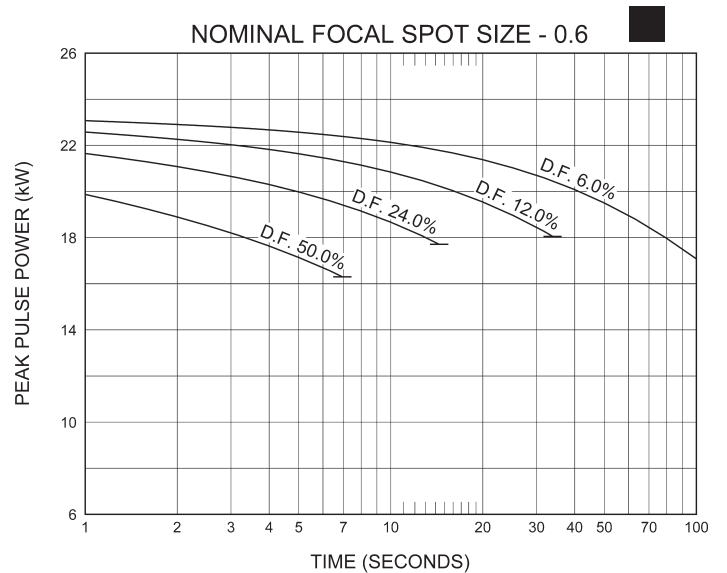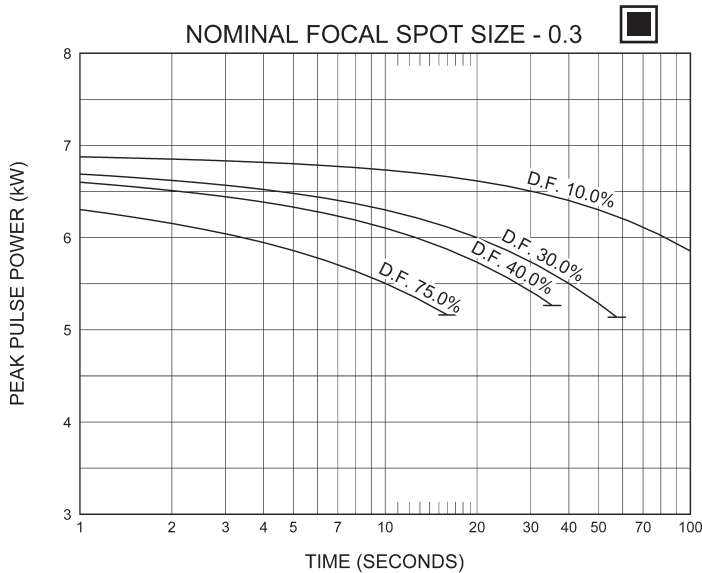

Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613



Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613



Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613

3 Ø Constant Potential

150 Hz

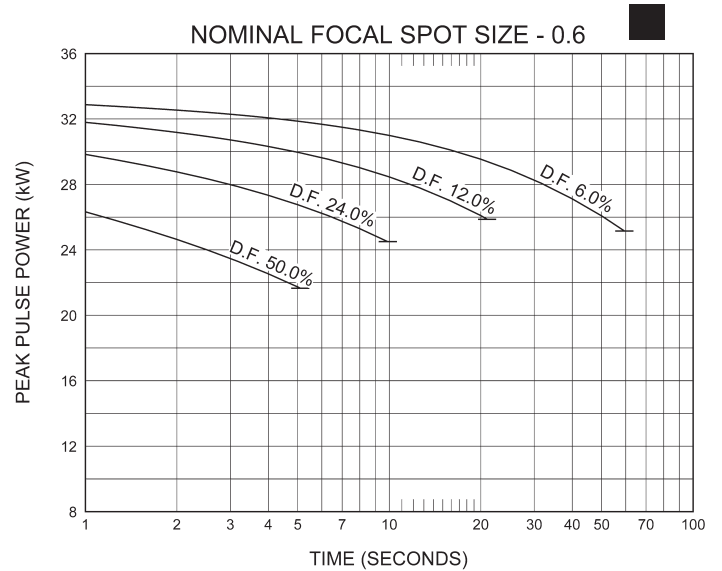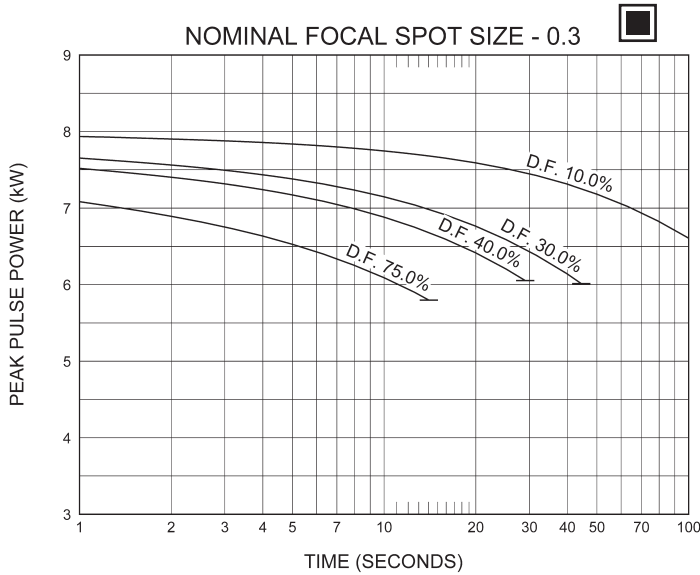

180 Hz

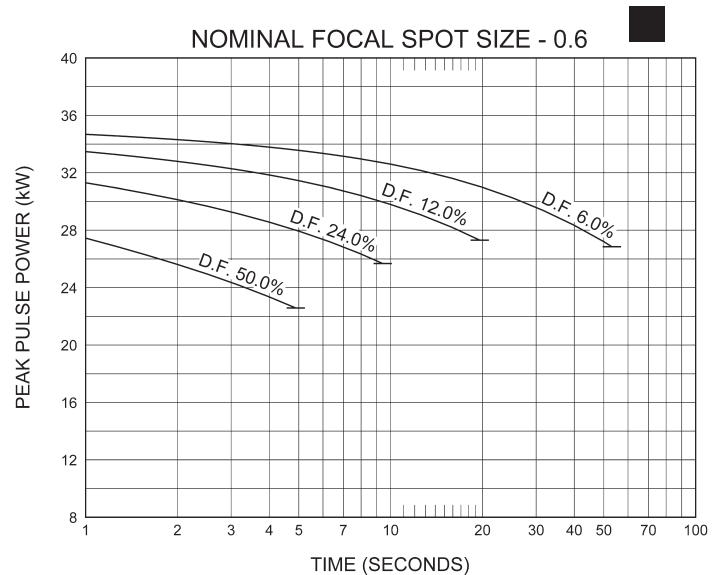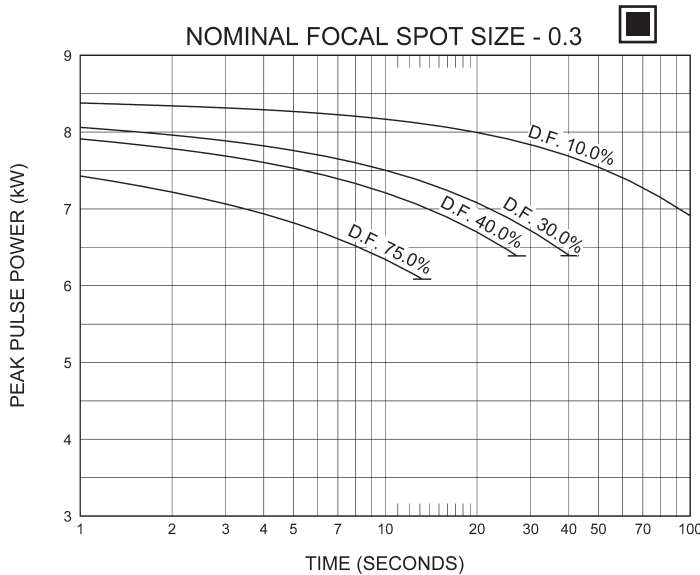

<p>Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613</p>	<p>Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613</p>	<p>Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613</p>	<p>Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613</p>
--	--	--	--

Anode Heating & Cooling Chart
 Abaques d' Échauffement et de Refroidissement de L'Anode
 Anoden Aufheiz - und Abkühl Kurven
 Curvas de Calentamiento y Enfriamiento del Anodo

